

°M Warmer



Velmi výkonný jednorázový ohřívač krve a
intravenózních tekutin od °MEQU

Ohříváč °M Warmer

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Rychlý a velmi účinný jednorázový ohříváč krve a intravenózních tekutin.

Vysoké průtoky

Ohřev krve a tekutin z 5 °C na 37 °C při průtocích až do 150 ml/min.

Přenosnost

Kompaktní design s celkovou hmotností 800 gramů.

Okamžitý ohřev

Ohřev krve a tekutin na 37 °C za méně než 10 sekund.

Schváleno pro použití v letadlech a helikoptérách

Intuitivní použití

Rychlé a intuitivní použití s časem přípravy do 30 sekund. Pro běžné infuzní sety.

Velká ohřívací kapacita napájecího zdroje

Ohřev na 37 °C na jedno nabití:

- 2 litry krve/tekutiny z 5 °C
- 4 litry krve/tekutiny z okolní teploty

Další technické parametry

- Minimální plnicí objem 3,5 ml s ventily a hadičkami
- Max. vstupní tlak 300 mmHg
- Délka přívodního kabelu 120 cm
- Životnost napájecího zdroje min. 100 nabíjecích cyklů



Bezkonkurenčně snadné použití

Nastavení systému °M Warmer je extrémně intuitivní a zabere méně než 30 sekund. Nic nelze sestavit nesprávným způsobem, aby se předešlo chybám ve stresové situaci.



Rychlý a mimořádně účinný ohřev

Pomocí patentované ohřívací technologie dokáže °M Warmer ohřát nitrožilní tekutiny a krev ze studené teploty na tělesnou teplotu za méně než 10 sekund.



Minimální objem naplnění

Objem naplnění je pouze 3,5 ml a tím nedochází ke zbytečnému plýtvání krví.



Letecká a rychlá záchranná služba



Armáda a speciální jednotky



Urgentní medicína a nemocniční péče

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme. Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.



Sdílejte naše vize

Nekomplikované řešení v rozhodující okamžik

Podávání správně ohřáté
krve výrazně snižuje riziko
hypotermie a účinně pomáhá
zabránit traumatické triádě
smrti.

Intuitivně. Okamžitě.
°M Warmer

Traumatická triáda smrti

Traumatická triáda smrti je kombinace
hypotermie, acidózy a koagulopatie.

Smrtící diamant

Smrtící diamant je dále
doplněn o **hypokalcemii**.



**Hypotermie je nejčastější příčinou
poruchy srážlivosti krve.**

Hypotermie
Nízká tělesná teplota



Koagulopatie
Problém se srážlivostí
krve




Acidóza
Překyselení krve

Hypokalcemie
Snížená koncentrace kalcia



Zjednodušení kritické cesty pacienta

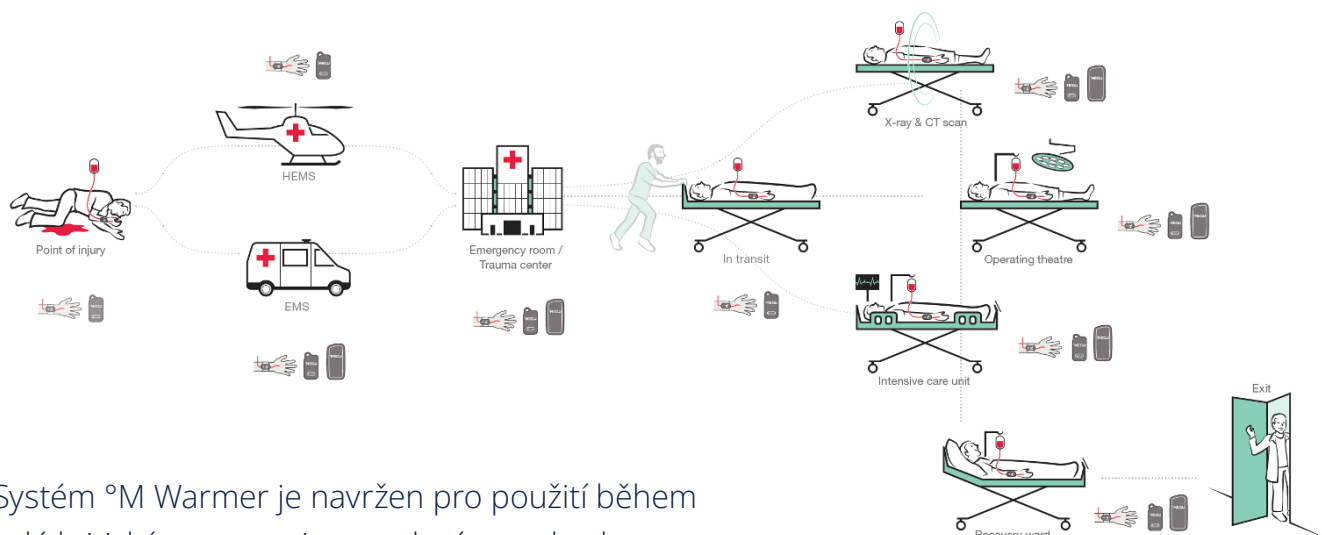

Systém °M Warmer je navržen pro použití během celé kritické cesty pacienta od místa nehody po operační sál, a dále dle potřeby...

Více informací na www.mequ.cz



Ohříváč

Jednorázový ohříváč °M Warmer

P 07605 5ks

6 600,-

Přenosná konfigurace

Napájecí zdroj pro °M Warmer

P 07757 1ks

68 600,-

Nabíjecí kabel pro °M Warmer

P 07758 1ks

5 890,-

Stacionární konfigurace

Napájecí stanice pro °M Warmer

P 07968 1ks

94 040,-



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: obchod@polymed.cz

